

3M Cuidado de la Salud ahora es Solventum

3M™ Filtek™ Easy Match


Resina Universal



Beneficios




Casos
Clínicos

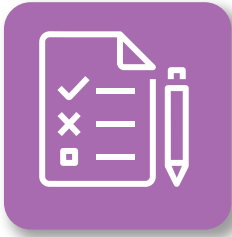

FAQS



Información
Comercial

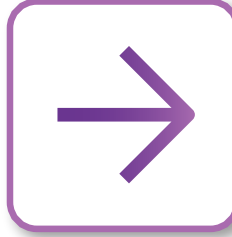

| Beneficios

3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal



Tonos FEM



Selección
Intuitiva



Opacidad
Naturalmente
Adaptativa



Resistencia
al Desgaste



 | Beneficios

 | Casos Clínicos

 | FAQs

 | Info. Comercial

**3M™ Filtek™
Easy Match**

Resina Universal

3 | Tonos FEM




Coincide con los 16 tonos clásicos de la guía VITA utilizando solo tres tonos de cuerpo: Bright, Natural y Warm.


Indicado para restauraciones posteriores y anteriores.

Desarrollado con nanotecnología clínicamente probada, derivada de la reconocida familia de restauradores dentales 3M™ Filtek™


Bright (B)

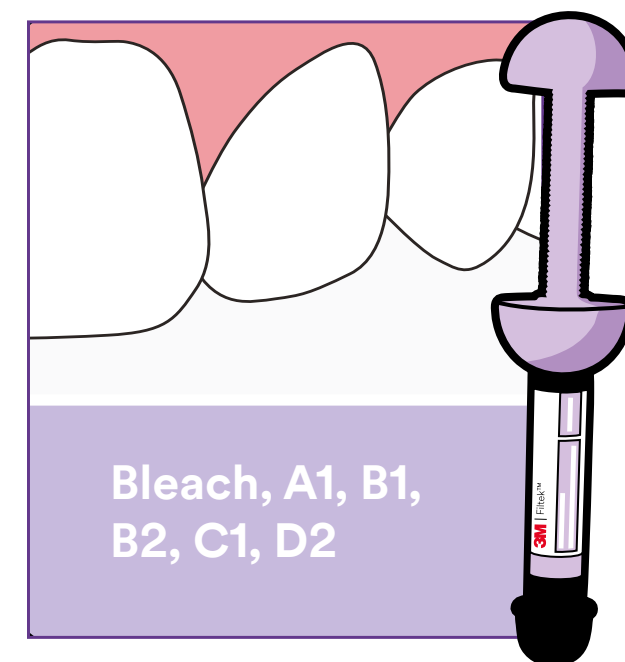

Natural (N)

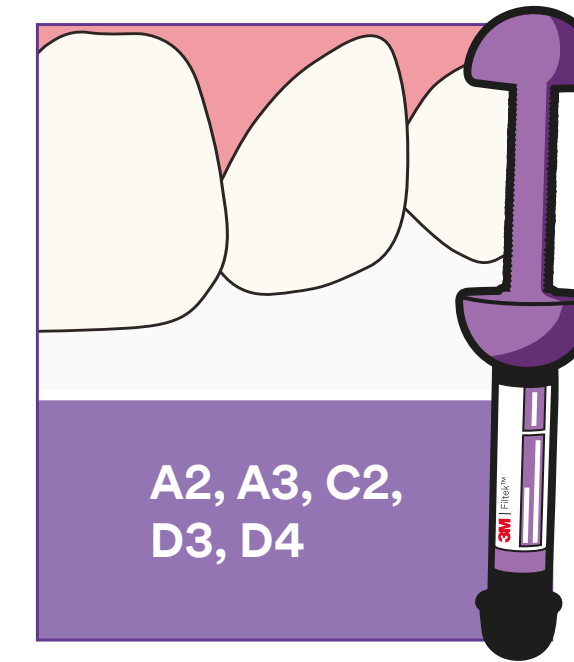

Warm (W)

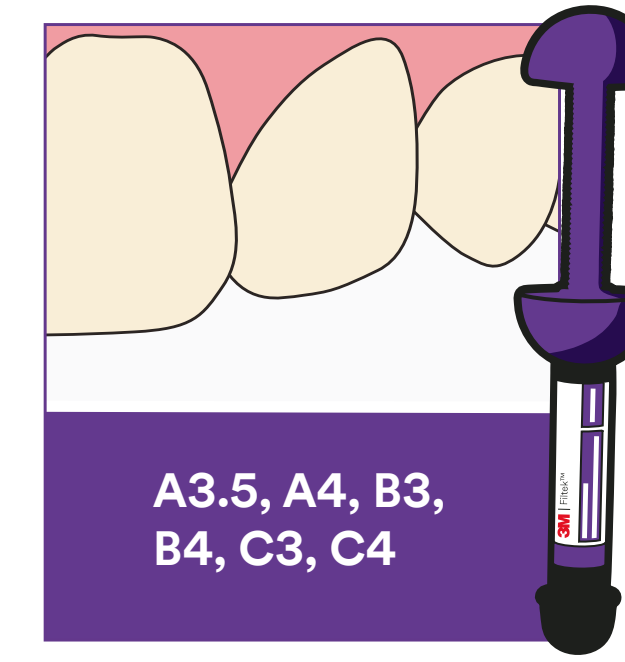


Selección Intuitiva

La selección del tono es intuitiva y sencilla:

El **croma**, o intensidad del tono, es solo uno de los componentes que conducen a un buen ajuste de color. Incluso una resina del “tono correcto” puede destacar sobre los dientes adyacentes si su valor (claridad/oscuridad relativa) u opacidad no coinciden correctamente.



Bright: bajo croma, alto valor

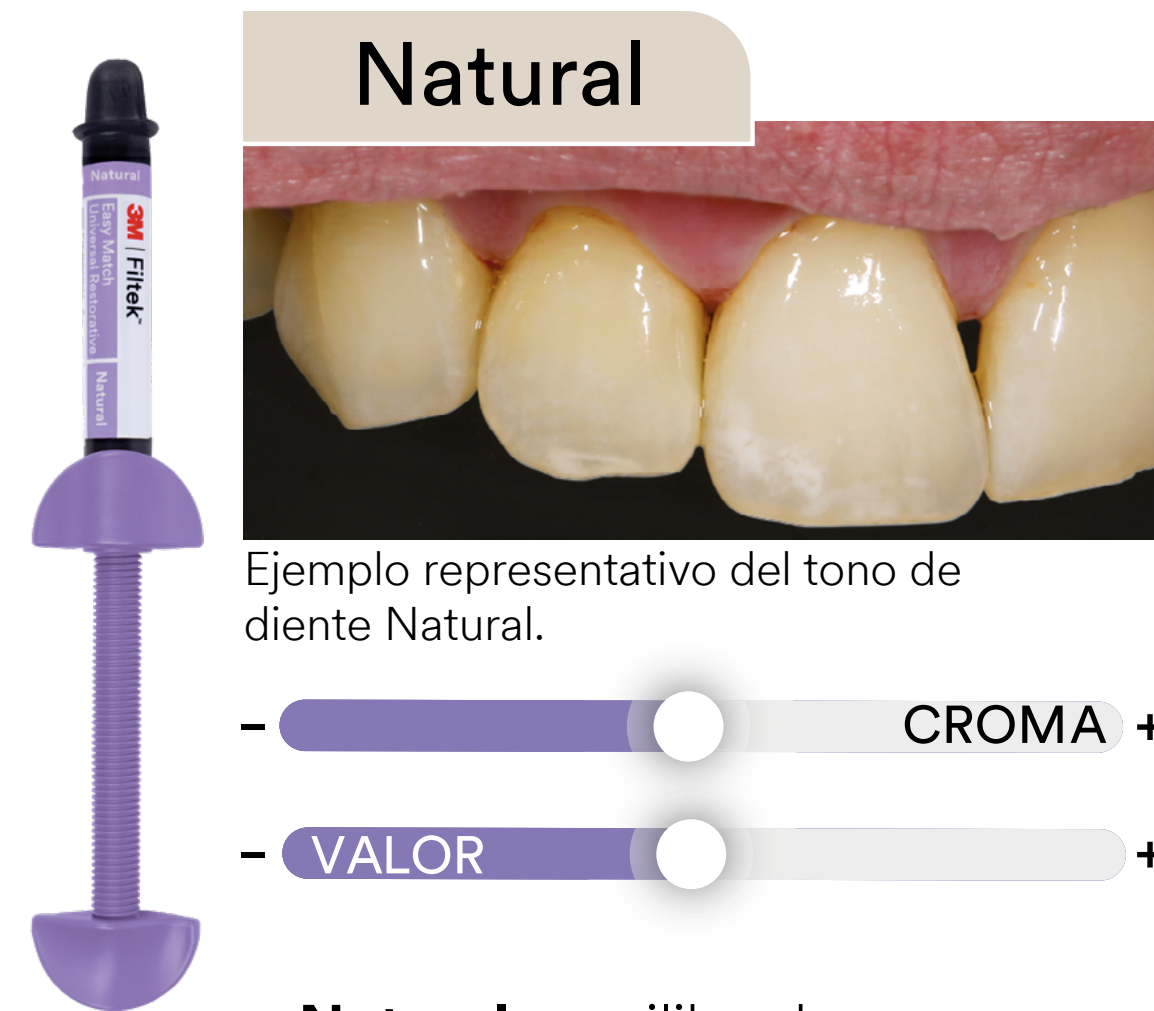


Natural: equilibrado, croma y valor medios




Warm: alto croma, bajo valor


Volver

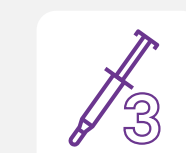


Tonos FEM

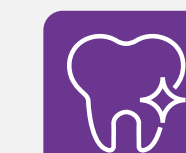

Selección Intuitiva

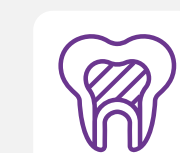

Opacidad

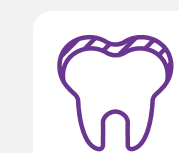

Desgaste

| Opacidad Naturalmente Adaptativa


¿Cómo funciona? Con el poder de la opacidad naturalmente adaptativa.

3M™ Filtek™ Easy Match no necesita opacador para enmascarar la oscuridad de la cavidad oral en restauraciones anteriores. Su opacidad naturalmente adaptativa proporciona una translucidez similar a la del esmalte en grosores de 0,5 a 1 mm, exactamente donde se necesita para el bisel y el borde incisal. Mientras que en grosores ≥ 2 mm, ofrece una opacidad similar a la de la dentina.


Todas las resinas se vuelven más translúcidas cuando se aplican en capas más finas. Pero la opacidad naturalmente adaptativa de 3M™ Filtek™ Easy Match se adapta de manera óptima tanto a la dentina como al esmalte, lo que ayuda a que se integre con la estructura dental circundante y proporciona un aspecto natural.



La opacidad naturalmente adaptable de 3M™ Filtek™ Easy Match proporciona un aspecto natural con una sola opacidad.

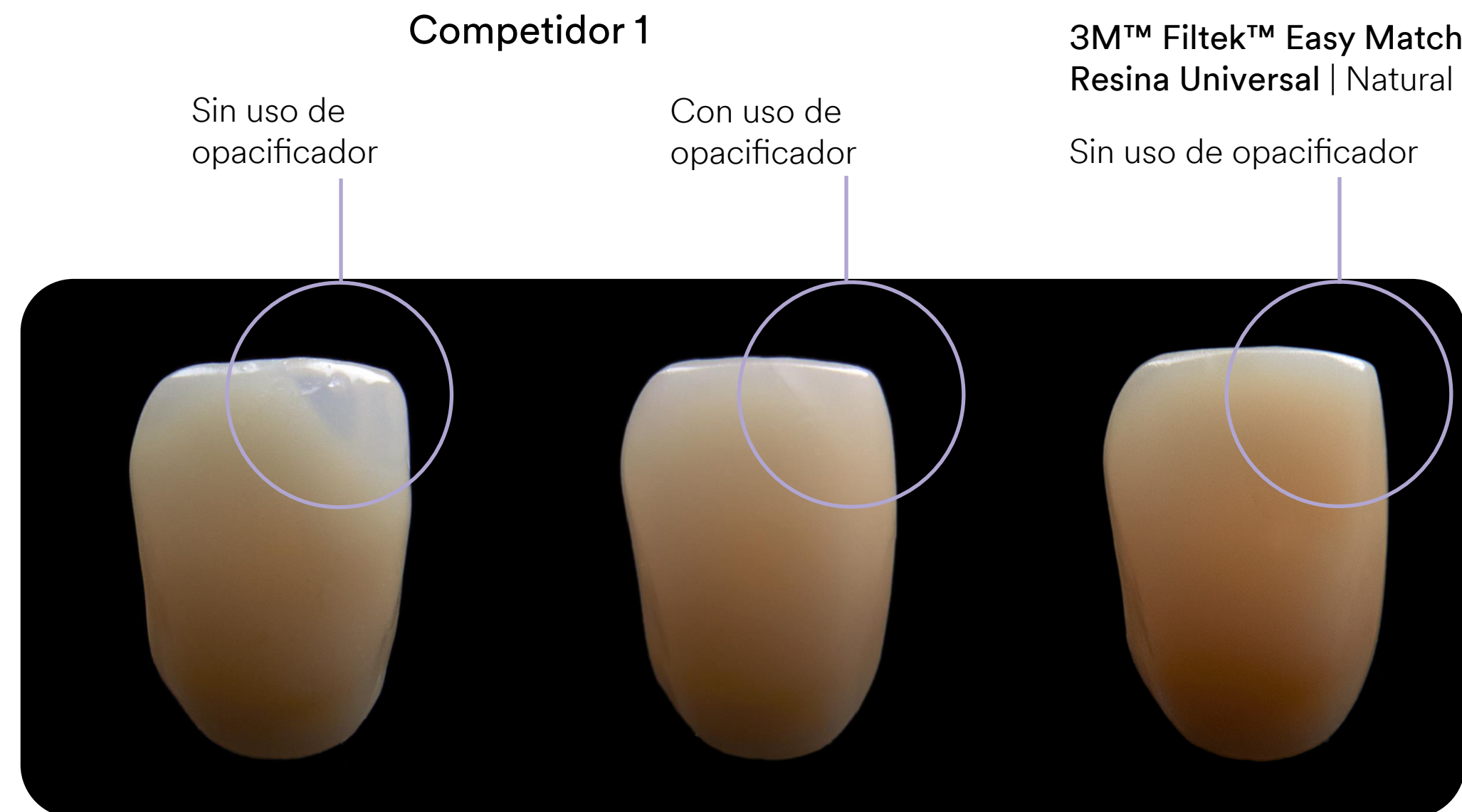

Opacidad Naturalmente Adaptativa

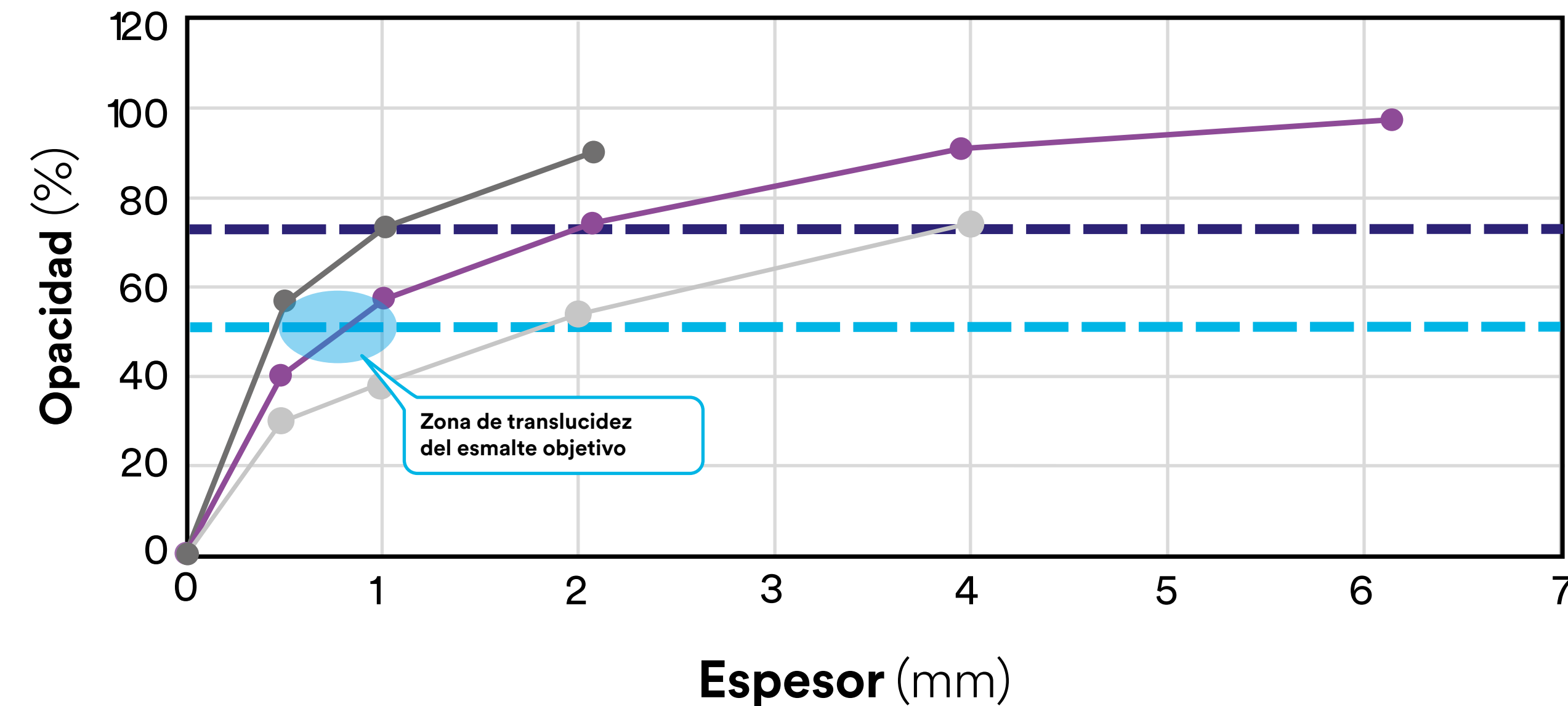

Valor da dentina

3M™ Filtek™ Easy Match muestra una opacidad similar a la de la dentina en espesores ≥ 2 mm

Valor do esmalte


3M™ Filtek™ Easy Match muestra una translucidez similar a la del esmalte en espesores de 0,5 a 1 mm

3M™ Filtek™ Z350 XT | Dentina


3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal | Natural

Competidor 1

| Resistencia al Desgaste

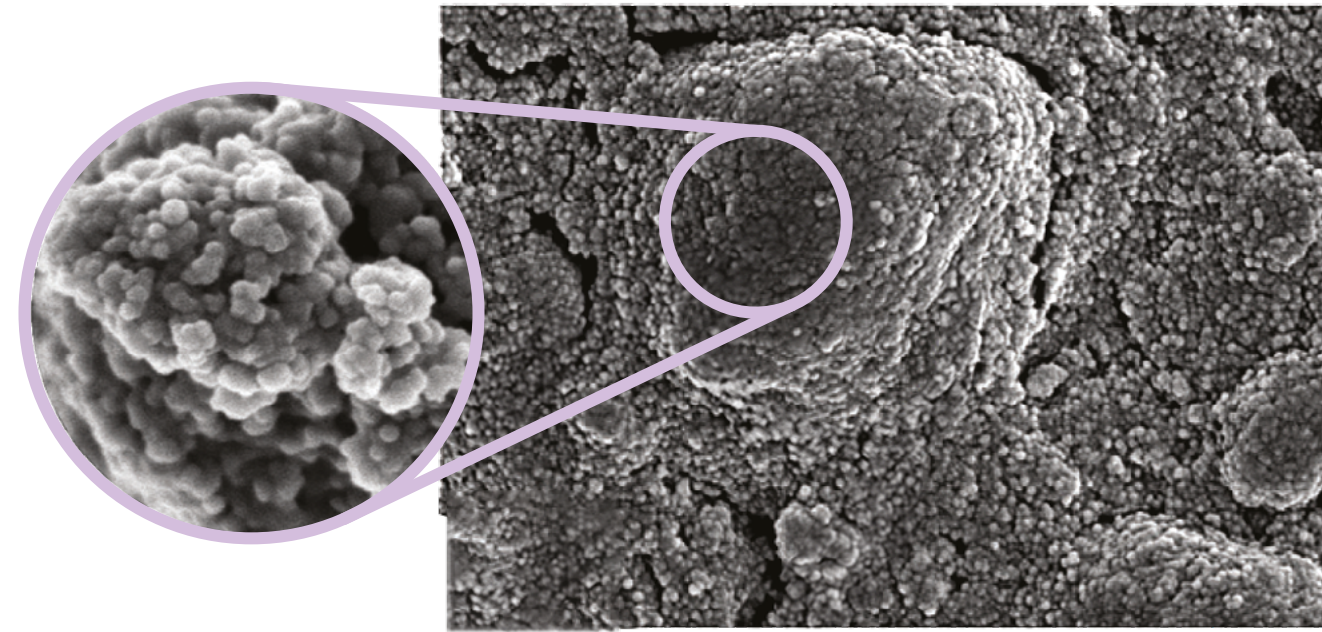

Nanoclúster del restaurador universal 3M™ Filtek™ Easy Match a 100x de aumento

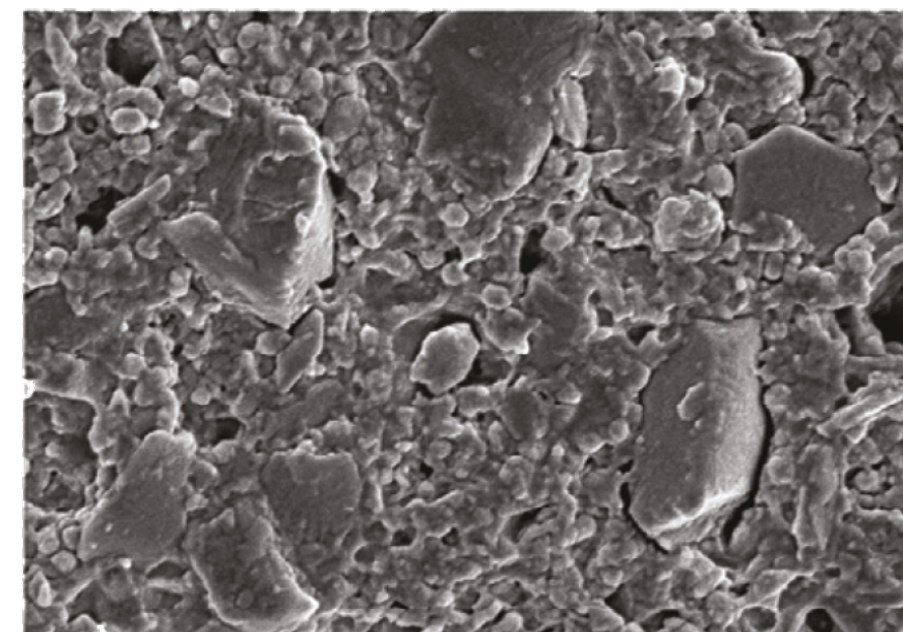

Principal resina de la competencia

Detalle de la verdadera nanotecnología

3M™ Filtek™ Easy Match cuenta con la misma tecnología de verdadero nanorelleno utilizada en nuestras principales resinas dentales 3M™ Filtek™. Los exclusivos nanoclústeres permiten una excelente resistencia al desgaste y ayudan a que la resina conserve una superficie suave.




Fotos de SEM cortesía del Dr. J. Perdigao, Universidad de Minnesota.


 Volver



Tonos FEM

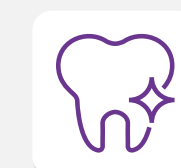

Selección Intuitiva

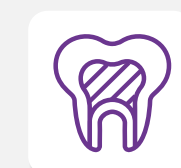

Opacidad



Desgaste

3M™ Filtek™ Easy Match

Resina Universal

Casos Clínicos



Cortesía:
Dr. José Carlos Garófalo

Simplificando la rehabilitación estética
con restauraciones directas en resina



Cortesía:
Dr. Rafael Calixto

Restauraciones Clase IV con 3M™
Filtek™ Easy Match Resina Universal




Casos Clínicos



Cortesía:
Dr. Mauricio Watanabe

Restauración Posterior Clase II
con resina compuesta 3M™ Filtek™
Easy Match Resina Universal

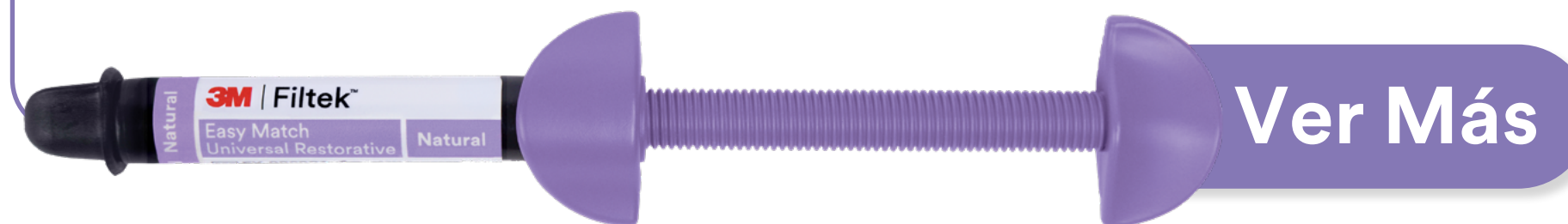

Ver Más



Cortesía:
Dr. Roberto Zangirolami

Restauración de Clase III con
la resina compuesta 3M™ Filtek™
Easy Match Resina Universal



Ver Más

Casos Clínicos



Cortesía: Dr. Paulo Monteiro

Emparejar fácilmente una lesión cervical no cariosa de Clase V



Restauración estética de Clase I con 3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal



Simplificando la rehabilitación estética con restauraciones directas en resina



3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal, tono Bright.

Acerca del caso

Paciente masculino, de 16 años, después de la finalización de la ortodoncia, se observa dientes pequeños, anatómicamente incompatibles con cierre de espacios interproximales. Adicionalmente se evidencia una gran exposición de tejido gingival.

Plan de tratamiento: Blanqueamiento dental, cirugía estética periodontal, intervalo de 60 días y posteriormente rehabilitación estética con adiciones estratégicas de resina compuesta



Antes



Después



1

Pos operatorio inmediato.



2

Pos operatorio a los 60 días.



3

Aislamiento con goma dique.



4

Se realiza selección intuitiva del tono entre el tono Bright y Natural del sistema 3M™ Filtek™ Easy Match.

Resumen del caso

Refiérase a las instrucciones de uso para una completa información del producto.



5 Se realiza acondicionamiento del esmalte con ácido fosfórico por 30s.



6 Aplicación del adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus.



7 Aplicación de incrementos de resina utilizando 3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal, tono Bright.



8 Uso de una matriz metálica para definir el contorno proximal.



9 Anatomía primaria establecida.



10 Nueva sonrisa después de finalizada las restauraciones.



11 Apariencia al final de las restauraciones, después del pulido y el acabado inicial.



12 Apariencia final: 7 días después de realizadas las restauraciones y después del pulido final.

Restauraciones Clase IV con 3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal



3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal, tono Bright.

Acerca del caso

Paciente L.S, de 28 años, presentaba restauraciones de Clase IV insatisfactorias en cuanto a color y forma. Además, el pulido y el volumen de la resina eran incorrectos.

El mayor desafío fue realizar una restauración de Clase IV con una sola capa y lograr un nivel de opacidad satisfactorio, además de ocultar eficazmente la línea de unión (bisel) de las restauraciones.



Caso clínico inicial.



Selección de tono entre las opciones más adecuadas de 3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal. Para el diente 11, se seleccionó el color Natural, mientras que para el diente 21, el color elegido fue el Bright.



Aislamiento absoluto y aplicación del adhesivo universal 3M™ Scotchbond™ Universal Plus.

Resumen del caso

Refiérase a las instrucciones de uso para una completa información del producto.

 Beneficios

 Casos Clínicos

 FAQs

 Info. Comercial



Resumen del caso

Refiérase a las instrucciones de uso para una completa información del producto.



Acabado con discos 3M™ Sof-Lex™ Pop-On medio y pulido con gomas 3M™ Sof-Lex™ Espirales - beige y rosa, finalizando con disco de fieltro.



Resultado inmediato con aislamiento absoluto. Tenga en cuenta que el diente está deshidratado y las restauraciones aún son evidentes.



Caso clínico final después de 1 semana.



 Beneficios

 Casos Clínicos

 FAQs

 Info. Comercial

Restauración Posterior Clase II con resina compuesta 3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal



 Beneficios

 Casos Clínicos

 FAQs

 Info. Comercial

3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal, tono Natural.

Acerca del caso

Paciente de 30 años con lesión cariosa en la superficie distal del diente 36, sin sintomatología dolorosa, me consultó para restaurar la cavidad.

El desafío fue realizar una restauración utilizando una resina de color único aplicando pocas capas.

El resultado fue extremadamente satisfactorio en cuanto a la facilidad de ejecución y el aspecto estético obtenido.



Antes




Después




1

Realizamos el acondicionamiento ácido selectivo del esmalte luego de regularizar los márgenes de la cavidad con una punta diamantada FF.

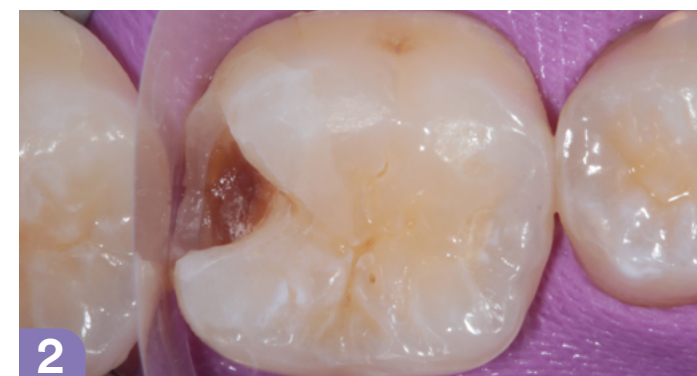

2

Tras remover el ácido fosfórico con agua y secar, colocamos una tira de poliéster para que el adhesivo no entre en contacto con la superficie proximal del diente 37.

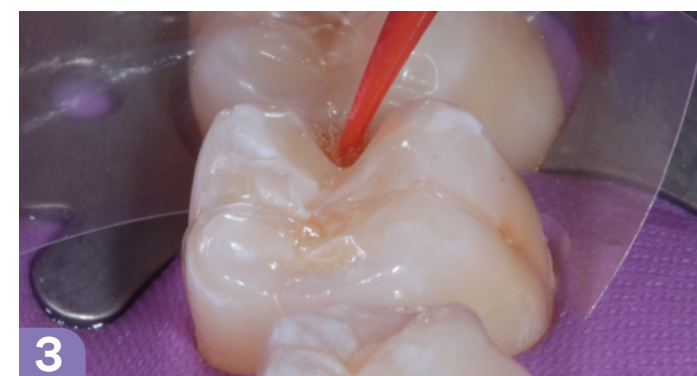


3

Aplicamos el adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus durante 20 segundos y aplicamos un chorro de aire para eliminar el solvente.

Resumen del caso

Refiérase a las instrucciones de uso para una completa información del producto.

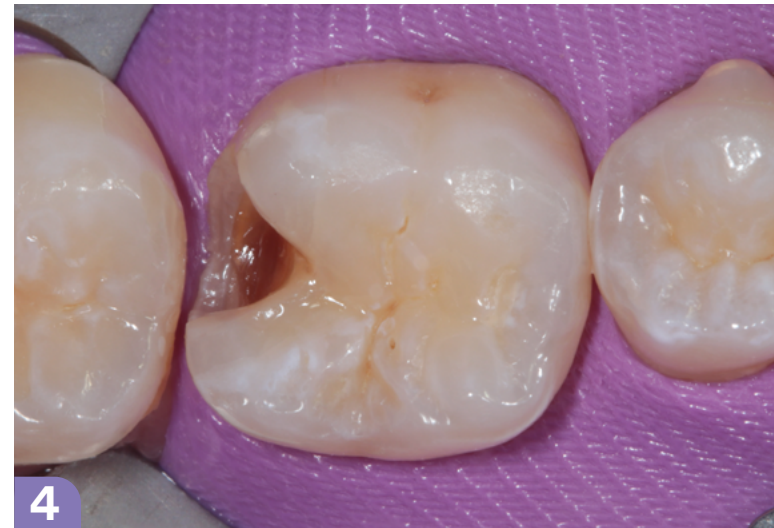

4 Observe el aspecto del adhesivo en esta fase.



5 Adaptamos una matriz parcial metálica con una cuña y utilizamos un anillo separador para obtener un mejor contacto proximal.



6 Elegimos la resina 3M™ Filtek™ Easy Match, tono Natural, para realizar la restauración.



7 Aplicamos la primera capa cubriendo todo el fondo de la cavidad y fotopolimerizamos.



8 En la segunda aplicación, cerramos la caja proximal.



9 Aplicamos una tercera capa nivelando la restauración con los límites oclusales de la cavidad.



10 Aplicamos un poco más de resina para esculpir la forma de la superficie oclusal.



11 Aspecto de la restauración después de retirar la matriz.




Resumen del caso

Refiérase a las instrucciones de uso para una completa información del producto.



12 Con una hoja de bisturí 15C, eliminamos el exceso de material.

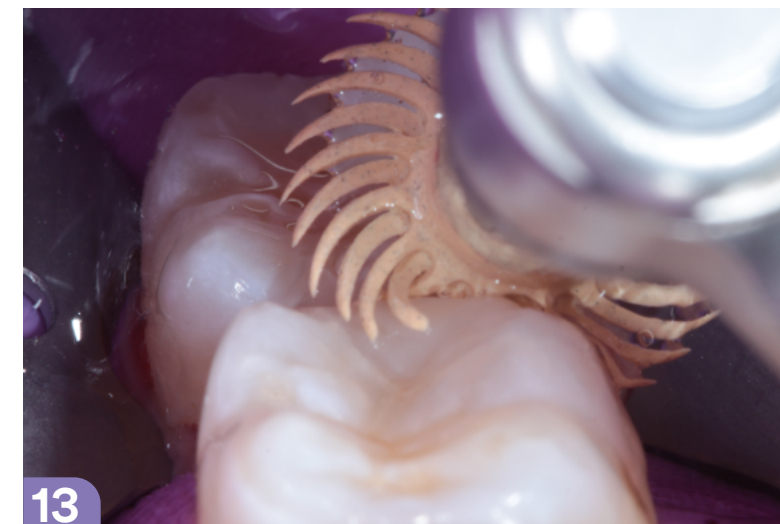

13 Utilizamos disco 3M™ Sof-Lex™ Spiral beige bajo irrigación para dejar la superficie lisa.



14 Aspecto de la superficie presentando lisura, pero aún sin brillo.



15 Utilizamos disco 3M™ Sof-Lex™ Spiral rosa bajo irrigación para obtener el brillo.



16 Observen la lisura de la superficie de la restauración.



17 Vista desde otro ángulo mostrando la restauración realizada con la resina 3M™ Filtek™ Easy Match

Restauración de Clase III con la resina compuesta 3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal



 Beneficios

 Casos Clínicos

 FAQs

 Info. Comercial

3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal, tono Natural.

Acerca del caso

Paciente de sexo femenino, de 42 años de edad, presentaba restauraciones antiguas en las superficies mesial y distal del incisivo lateral, superficie mesial del canino y una cavidad en la superficie distal del incisivo central.

El desafío en este tipo de restauración es elegir el tono y la opacidad correctos para que, al final, no sea posible ver la línea de transición entre el diente del paciente y la restauración.

Este caso demuestra que es posible obtener excelentes resultados con un sistema simplificado que tiene pocas opciones de tonos y una sola opacidad.



Foto inicial que muestra restauraciones antiguas en las superficies mesial y distal del incisivo lateral, superficie mesial del canino y una cavidad en la superficie distal del incisivo central



Aislamiento con goma dique, después de la apertura de las cavidades, vista palatina



Aislamiento con de goma dique, después de la apertura de las cavidades

Resumen del caso

Refiérase a las instrucciones de uso para una completa información del producto.



4 Grabado con ácido fosfórico al 35%



5 Se aplica el adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus, con un microbrush



6 Fotopolimerización con lámpara de Fotocurado LED 3M™ Elipar™ DeepCure-L



7 Superficie mesial del canino después de la restauración con la resina compuesta 3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal en el tono Natural



Superficie distal del incisivo central después de la restauración con la resina compuesta 3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal en el tono Natural



Se creó una capa palatina, realizada en etapas, incluso sabiendo que se utilizaría solo una resina compuesta, lo cual es importante para ayudar a esculpir mejor la capa final. Se utilizó la resina compuesta 3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal en el tono Natural

Resumen del caso

Refiérase a las instrucciones de uso para una completa información del producto.



10 Eliminación del exceso bucal y proximal con los discos 3M™ Sof-Lex™ Pop-On (Rojo)



11 Eliminación del exceso bucal y proximal con los discos 3M™ Sof-Lex™ Pop-On (Naranja oscuro)



12 Eliminación del exceso bucal y proximal con los discos 3M™ Sof-Lex™ Pop-On (Naranja claro)



13 Eliminación del exceso bucal y proximal con los discos 3M™ Sof-Lex™ Pop-On (Amarillo)



14 Pulido con el Pulidor Espiral (Jota - Swiss)



15 Pulido con el Pulidor Espiral (Jota - Swiss)



16 Foto final, justo después de retirar la goma dique. Restauración realizada con la resina compuesta 3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal en el tono Natural

 Beneficios

 Casos Clínicos

 FAQs

 Info. Comercial

Emparejar fácilmente una lesión cervical no cariosa de Clase V

3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal, tono Warm.



Acerca del caso

La restauración de lesiones no cariosas es un tema que suscita muchos debates. Consideraciones como la retención, el aislamiento y la estética son siempre importantes de evaluar para proporcionar al paciente resultados duraderos. Frecuentemente, los tonos de los dientes en la región cervical tienden a ser más ricos en croma. 3M™ Filtek™ Easy Match Resinal Universal ofrece una solución sencilla e intuitiva para igualar el color también en estas zonas ricas en croma.



Antes



Después



1

El aislamiento con goma dique y una retracción adecuada son la clave del éxito en el tratamiento del NCCL. La placa y los restos se eliminan con aire de bicarbonato de sodio - pulido en polvo



2

El ácido fosfórico se utiliza para grabar selectivamente el esmalte, para mejorar la retención

Resumen del caso

Refiérase a las instrucciones de uso para una completa información del producto.



3 Se frota durante 20 segundos el adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus, tanto en esmalte como en dentina, se airea y se fotocura



4 Utilización de 3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal, tono Warm

***Nota**

***Nota**

Se puede utilizar o formato de resina en jeringas o en cápsulas dependiendo la disponibilidad en el país.



5 Se utiliza un instrumento de composite para dar forma a la resina 3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal



6 Observe el contorno y la transición suave entre el diente y la restauración antes de realizar el acabado y el pulido



7 Vista mesiobucal de la restauración. Obsérvese que se ha conservado y restaurado el perfil de emergencia natural del diente

 Beneficios

 Casos Clínicos

 FAQs

 Info. Comercial

3M™ Filtek™
Easy Match

Resina Universal

Restauración estética de Clase I con 3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal



3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal, tono Warm.

Acerca del caso

Las restauraciones de Clase I son el “pan de cada día” de la odontología restauradora. Este paciente presentaba caries de fosas y fisuras en el segundo molar inferior derecho, evidentes tras la exploración clínica y el sondeo. Con una preparación mínimamente invasiva, se utilizó la resina universal 3M™ Filtek™ Easy Match en tono Warm para lograr una restauración simple y estética



Tras el aislamiento con dique de goma y la preparación mínimamente invasiva, el diente está listo para la adhesión.



El ácido fosfórico se emplea para realizar un grabado selectivo del esmalte dental, dejándolo con un aspecto mate y rugoso tras el enjuague.



3M™ Scotchbond™ Universal Plus se frota sobre la preparación tanto en esmalte como en dentina por 20 segundos, se airea por 5 segundos y se fotocura.

Resumen del caso

Refiérase a las instrucciones de uso para una completa información del producto.



4

Se selecciona 3M™ Filtek™ Easy Match Resina Universal, tono Warm se aplica sobre la cavidad en incrementos de 2 mm

***Nota**




7

Se utilizan los discos 3M™ Sof-lex™ de Prepulido en la superficie oclusal de la restauración

***Nota**

Se puede utilizar o formato de resina en jeringas o en cápsulas dependiendo la disponibilidad en el país.

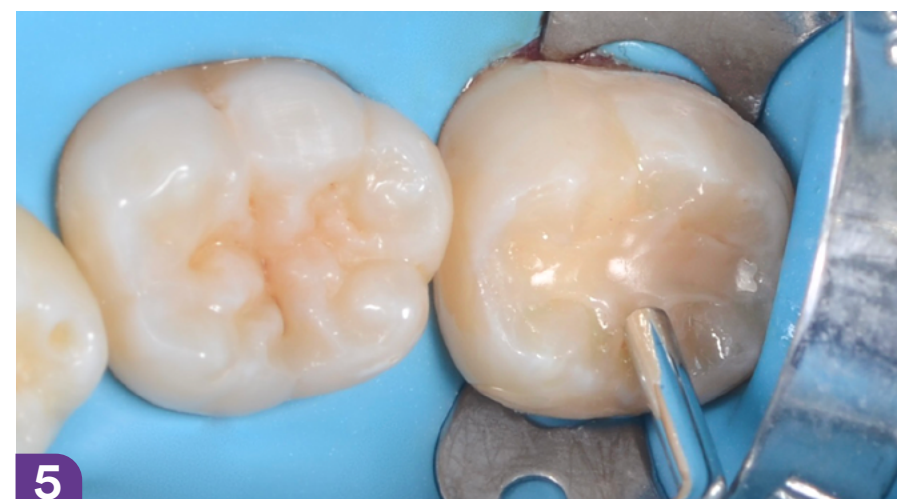

5

Se utilizan instrumentos para modelar el material y eliminar los excesos



6

Se definen los surcos anatómicos de manera natural y funcional



8

Se utilizan los discos 3M™ Sof-lex™ Diamond para obtener un pulido de alto brillo



9

Resultado final tras ajuste oclusal y pulido



 Beneficios

 Casos Clínicos

 FAQs

 Info. Comercial

FAQS

1

¿Por qué 3M™ ha lanzado una nueva resina universal optimizada?

La resina universal 3M™ Filtek™ Easy Match está diseñada para ofrecer una solución optimizada que facilita restauraciones de aspecto natural, gracias a una selección del tono más simple y una gestión de inventario optimizada. La selección del tono con 3M™ Filtek™ Easy Match es intuitiva, ya que solo requiere elegir entre tres opciones. El tono “Natural” se adapta a la mayoría de las sonrisas, mientras que los tonos “Bright” y “Warm” proporcionan opciones adicionales según las necesidades del paciente.

2

3M™ Filtek™ Easy Match: ¿es una resina de relleno en bloque?

No, 3M™ Filtek™ Easy Match es una resina universal que se puede colocar en incrementos de hasta 2 mm.

3

¿Cómo se comparan los productos dentro de la familia de restaurativos dentales 3M™ Filtek™?

3M™ Filtek™ Easy Match está diseñada para ofrecer una solución optimizada que permite realizar restauraciones de aspecto natural mediante una selección del tono más fácil y una gestión de inventario reducida. 3M™ Filtek™ Easy Match, con solo un tono principal (Natural) y dos tonos complementarios (Bright y Warm), es un sistema universal que ofrece soluciones para la mayoría de sus restauraciones posteriores y anteriores. La opacidad naturalmente adaptativa de la resina universal 3M™ Filtek™ Easy Match muestra una translucidez similar al esmalte donde se necesita, en el bisel y en el borde incisal.

3M™ Filtek™ Universal cuenta con 8 tonos que en conjunto con el tono Extra White (XW), cubren los 19 tonos clásicos y de blanqueamiento de la guía VITA. El tono Pink Opaquer (PO) está diseñado para enmascarar metales y manchas oscuras, mejorando la estética y la gestión de la opacidad. Todos los tonos ofrecen una opacidad universal que satisface la mayoría de las necesidades clínicas.

3M™ Filtek™ Z350 XT está diseñada para coincidir de manera precisa con cualquier tono dental, cuenta con 36 tonos diferentes y múltiples opacidades: Dentina, Esmalte, Cuerpo y Translúcido, para ofrecer el más alto nivel de estética. 3M™ Filtek™ Z350 XT permite a los dentistas crear restauraciones con múltiples tonos y opacidades, proporcionando una completa “paleta de artista” para reproducir con precisión detalles estéticos.

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative está diseñada para restauraciones posteriores. Su relación de contraste inteligente mejora la opacidad y proporciona la simplicidad de una colocación en un solo paso de hasta 5 mm (en restauraciones Clase II), sin comprometer los resultados estéticos.



FAQS

4 ¿Cuál es la ciencia y tecnología en la resina universal 3M™ Filtek™ Easy Match que permite el “efecto camaleón”?

La resina universal 3M™ Filtek™ Easy Match se basa en nuestros materiales de restauración dental con nanorrelleno 3M™ Filtek™, líderes en el mercado y clínicamente probados. El uso patentado de nanorrellenos, pigmentos y opacadores de Solventum se combina para crear una opacidad equilibrada que, al aplicarse en los tonos Bright, Natural y Warm, genera un efecto de mezcla pronunciado con las estructuras dentales adyacentes. La opacidad naturalmente adaptativa garantiza una translucidez similar al esmalte en espesores clínicamente relevantes de 0.5 a 1 mm, en el bisel y el borde incisal de las restauraciones anteriores. Investigaciones de Solventum y la Universidad de Texas demuestran una notable capacidad de mezcla con opacidad equilibrada, eliminando la necesidad de un opacador adicional. En casos de decoloración de la dentina, puede emplearse un opacador específico para enmascarar.

5 ¿Cuáles son las recomendaciones para el curado de la resina universal 3M™ Filtek™ Easy Match?

Tono	Profundidad de incremento	Tiempo de curado	
		Lámparas halógenas (con salida de 550–1,000 mW/cm²)	Luces LED (con salida de 1,000–2,000 mW/cm²)
Bright, Natural, Warm	2.0 mm	20 seg	10 seg

6 ¿Cambia el tono después del curado?

Las propiedades ópticas de las resinas, en general, pueden cambiar después del curado con luz. Un curado adecuado de las resinas utilizando canforquinona, un fotoiniciador amarillo, disminuirá ligeramente el color amarillo general de la resina.

7 ¿Cómo describiría el pulido inicial y la retención de pulido de la Resina Universal 3M™ Filtek™ Easy Match con el tiempo?

Ofrece un excelente pulido inicial para los tres tonos. Sus partículas de relleno de tamaño nano permiten un pulido y retención de pulido típicos de un microrelleno, además de proporcionar un excelente manejo, resistencia y propiedades de desgaste necesarias para indicaciones universales.


8 ¿3M™ Filtek™ Easy Match se adhiere a mis instrumentos?

3M™ Filtek™ Easy Match ofrece un manejo firme, no pegajoso, y no debería adherirse a la mayoría de los instrumentos, lo que facilita su colocación.

FAQS

9 ¿Cómo se relacionan los tonos Bright, Natural y Warm con la guía de tonos VITA Classical?

El espectro del tono Bright, Natural y Warm está diseñado para representar de manera sencilla el rango del tono de las sonrisas de los pacientes, facilitando a los dentistas el paso de la observación a la selección del tono. Cada tono cubre un rango específico de la guía VITA Classical, como se describe en la Guía Rápida.

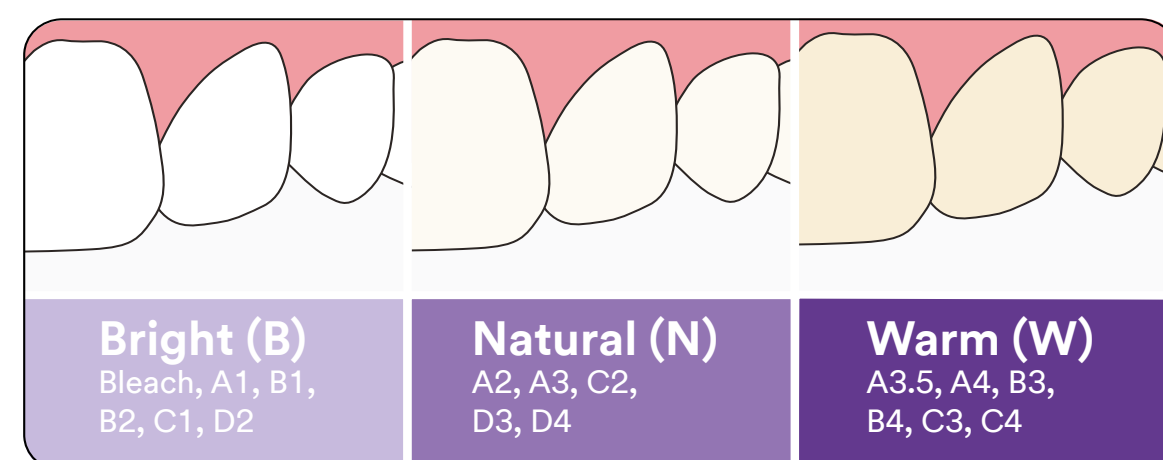

10 ¿Qué sistemas de dispensación ofrece 3M™ Filtek™ Easy Match?

La resina universal 3M™ Filtek™ Easy Match está disponible en jeringas.

11 Si uso la resina fluida 3M™ Filtek™ Supreme Flowable junto con la Resina Universal 3M™ Filtek™ Easy Match, ¿cómo puedo seleccionar el tono adecuado?

3M™ Filtek™ Easy Match es compatible con la resina fluida 3M™ Filtek Supreme Flowable, que está disponible en 12 tonos, de los cuales 9 coinciden con la guía VITA Classical (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2 y D2). Estos tonos pueden combinarse con los correspondientes tonos de 3M™ Filtek™ Easy Match, como se indica en la Guía Rápida.

12 Es posible una técnica de estratificación multitono en combinación con, por ejemplo, 3M™ Filtek™ Z350 XT?

Aunque no hay contraindicación para la estratificación de diferentes tonos, 3M™ Filtek™ Easy Match está diseñado como una solución estética del tono único. Para restauraciones que requieran una técnica de capas, se recomienda el uso de 3M™ Filtek™ Z350 XT.

13 ¿Puedo usar Pink Opaquer (PO) de la resina 3M™ Filtek™ Universal junto con la resina universal 3M™ Filtek™ Easy Match?

Sí, el opacador rosa (PO) de la resina 3M™ Filtek™ Universal es compatible con resina universal 3M™ Filtek™ Easy Match. Aunque la opacidad naturalmente adaptativa de 3M™ Filtek™ Easy Match permite su uso sin opacador en restauraciones anteriores, en algunos casos, como en dentina esclerótica, se requiere un enmascaramiento más fuerte.

FAQS

14

¿El material está libre de derivados del BPA?

Aunque no se añade BPA al material, la resina utilizada en 3M™ Filtek™ Easy Match contiene Bis-GMA. Si prefiere un material libre de derivados del BPA, se recomiendan 3M™ Filtek™ One Bulk Fill y/o 3M™ Filtek™ Universal.

15

¿La resina universal 3M™ Filtek™ Easy Match, se cura con luz ambiente?

Debe evitarse la luz directa hasta que se desee el curado final del incremento. Esto incluye fuentes de luz como las lámparas de las unidades dentales y las luces montadas en lupas. Al extruir cualquier cantidad de material sobre una superficie de mezcla para uso clínico, asegúrese de utilizar un protector de luz adecuado para evitar que la luz ambiental cure el material.

16

¿La resina universal 3M™ Filtek™ Easy Match es radiopaca?

Sí, la radiopacidad de 3M™ Filtek™ Easy Match es de 2.4 mmAl, lo que la hace ligeramente más radiopaca que el esmalte.

Información Comercial

Referencias	Descripción	Unidad/Caja	Registro Invima
70201422535	6420B EASY MATCH REST SYR	10	INVIMA 2024DM-0028822
70201422543	6420N EASY MATCH REST SYR	10	INVIMA 2024DM-0028822
70201422550	6420W EASY MATCH REST SYR	10	INVIMA 2024DM-0028822



- **Estética natural:** Con tan solo 3 tonos: Bright, Natural y Warm se puede alcanzar una integración con el diente natural, logrando un acabado casi imperceptible.
- **Facilidad de manejo:** Su consistencia facilita la manipulación y aplicación, lo que reduce el tiempo de trabajo y mejora la precisión.
- **Durabilidad:** Ofrece alta resistencia al desgaste asegurando que las restauraciones mantengansu apariencia a lo largo del tiempo.
- **Versatilidad:** Es adecuado para diversas aplicaciones, incluyendo restauraciones en el sector anterior y posterior, lo que lo convierte en una opción ideal para diferentes situaciones clínicas.




Beneficios

Casos Clínicos

FAQS

Info. Comercial

3M™ Filtek™
Easy Match
Resina Universal

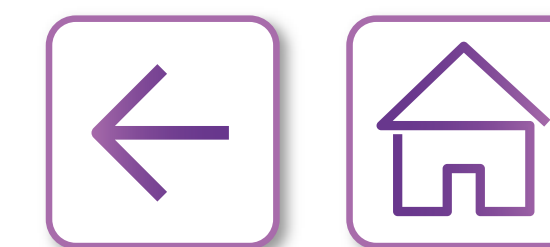

Solventum Corporation

Centro Empresarial Paralelo 108
Avenida 45 No. 108-28.
Torre 3, Of 1601
Bogotá | Colombia

Solventum, el logotipo S son marcas comerciales de Solventum y sus filiales. 3M y el logotipo de 3M son marcas comerciales de 3M. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Solventum 2025.